


브레이노 장치 연결 방법 (Windows 10)

디바이스 착용방법



1 컷불 집게가 오른쪽으로 오도록 합니다.

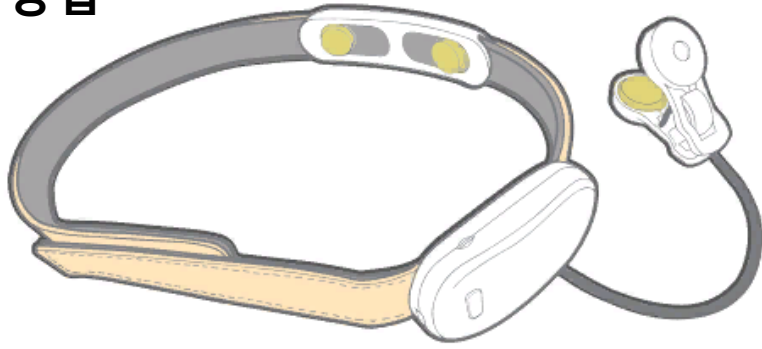

2 두 개의 전극이 이마 중앙에 오도록 착용합니다.



3 컷불 집게를 오른쪽 귀에 집어 고정합니다.




4 그림과 같이 장치 작용이 잘 되었는지 확인합니다.

○ 착용 방법은 위 그림에 나와 있는 순서대로 착용을 한다.

Windows 10 에서 블루투스 디바이스 연결 -1

○ 브레이노 디바이스는 블루투스 장치이므로, 먼저 윈도우 에서 블루투스로 연결한다.

(SD카드 메모리 기능 사용 시, 블루투스 연결은 불가함)

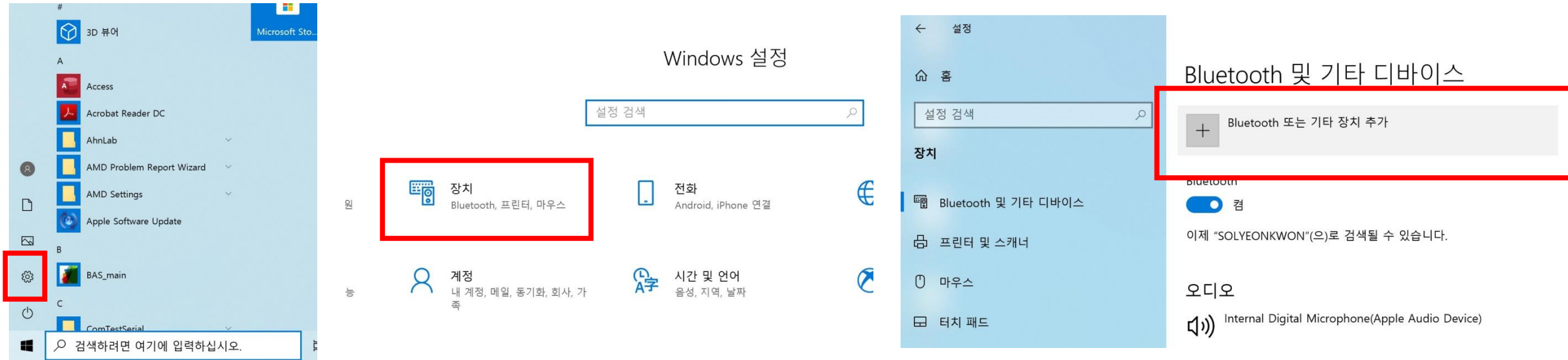


○ 블루투스 연결을 하기 위해서, 윈도우 키를 누른 뒤 설정 -> 장치에 들어간다.

○ 'Bluetooth 또는 기타 장치 추가' 버튼을 눌러 장치 연결을 시도한다.

Windows 10 에서 블루투스 디바이스 연결 -2

○ 아래 예제는 연결해야 할 디바이스 명이 "BG19_PRO" 인 디바이스 연결 예제이다.

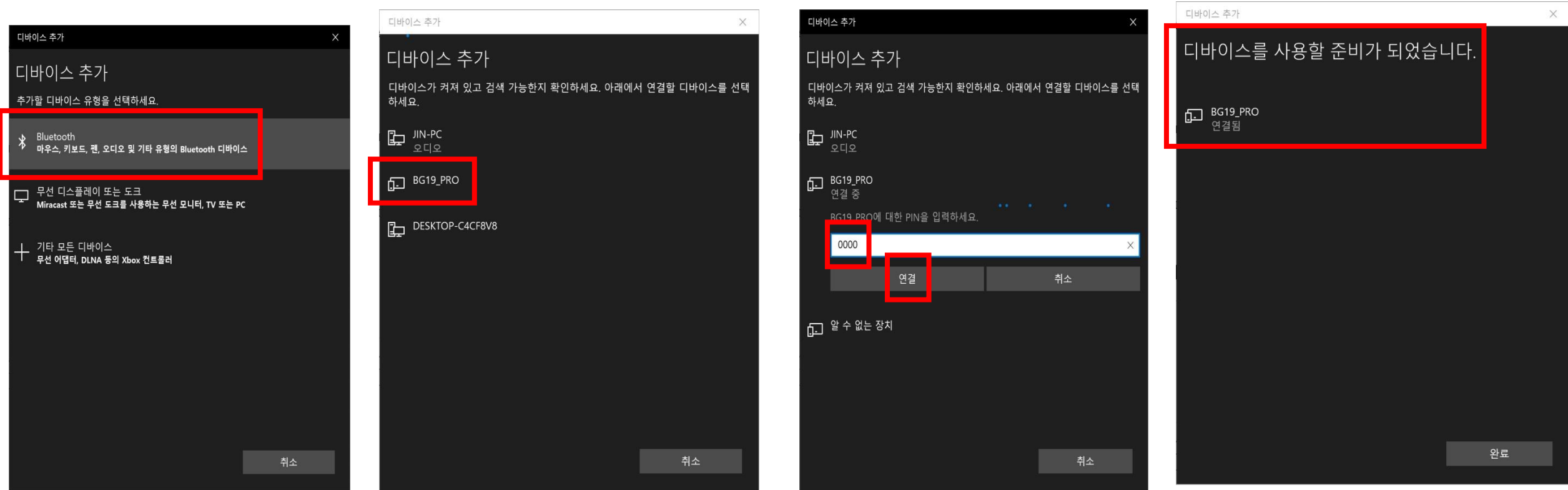

- 첫 번째에 있는 'Bluetooth'를 클릭한다. 연결할 디바이스의 전원을 켜다.
- 'BG19_PRO'라고 뜬 것을 클릭한 후, PIN 번호를 '0000'을 입력, '연결' 버튼을 클릭한다.
- 연결 성공 시, '연결됨'이라고 뜬다.

사용할 프로그램과 연결하기 위한 기본 정보 얻기


- 많은 프로그램에서 디바이스 연결수단으로 “COM” 포트로 표시되는 시리얼포트를 사용 한다.
- 여기서 다루는 디바이스도 블루투스 연결이 되면 고유 “COM” 포트 번호가 생성된다.




- '장치 및 프린터' 탭을 클릭하여 새 창을 연다.
- BG19_PRO 아이콘을 더블 클릭하여 속성 창을 연다.
- 속성 창에서 하드웨어 탭에 들어가 COM 포트 번호를 확인한다.
- 확인한 포트 번호는 각종 프로그램에서 디바이스를 연결하는 수단으로 사용된다.

Brainbay 프로그램과 연결

- Brainbay 실행하여 Design – Load Design 클릭하여 보내준 .con 디자인 파일을 선택한다.
- 하기 [사진1]에서 초록배경의 EEG칸에서 마우스 우클릭하면 [사진2] EEG창이 뜬다.

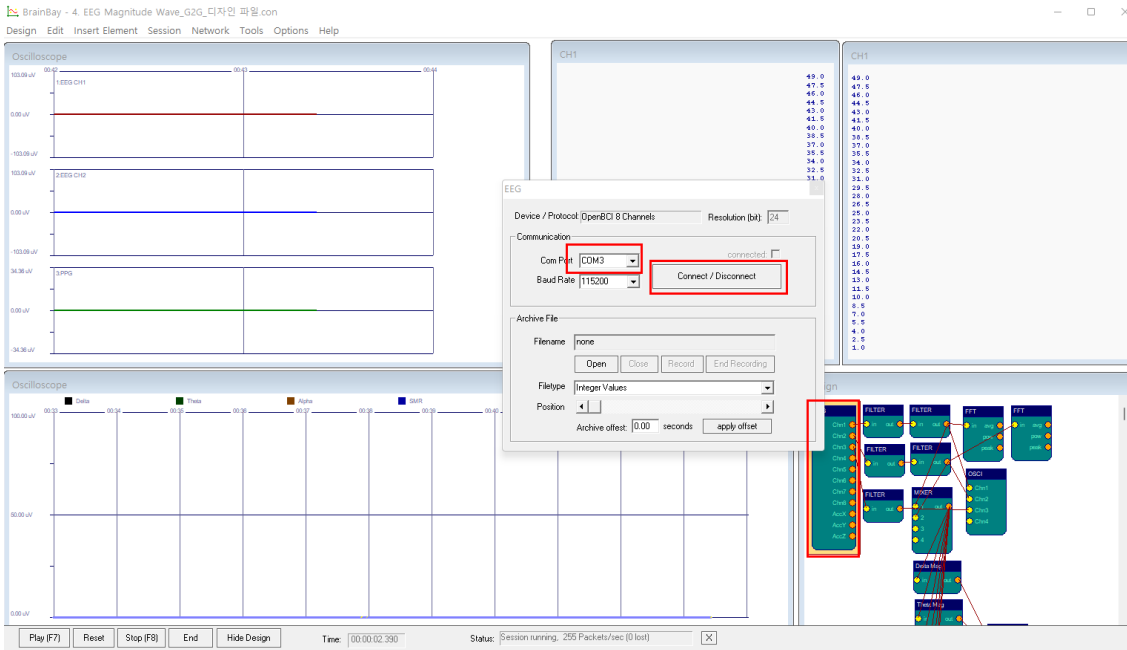


[사진1]

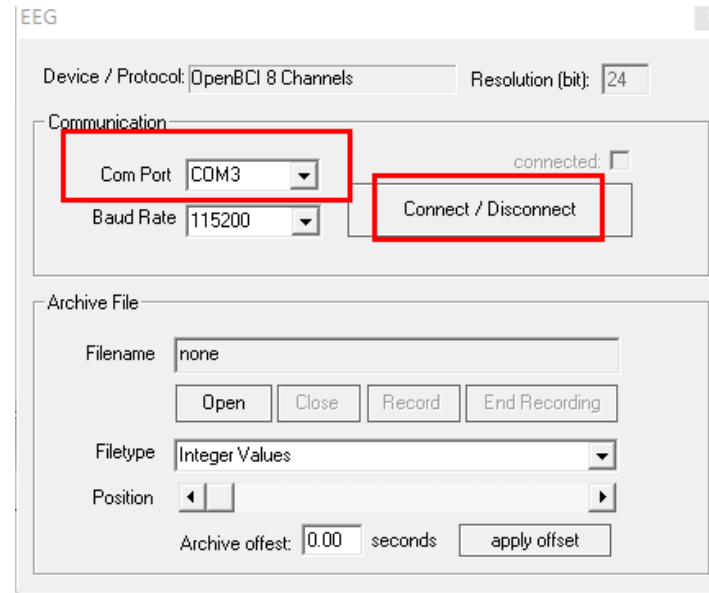

[사진2]

- EEG창에 확인한 디바이스 COM 포트 번호를 선택하여 Connect / Disconnect 선택한다.
- 연결되면 [사진] 최하단 좌측 Play 버튼 클릭하여 실시간 뇌파 및 PPG 신호 확인 가능하다.

밴드형 디바이스용 디자인 파일 설명

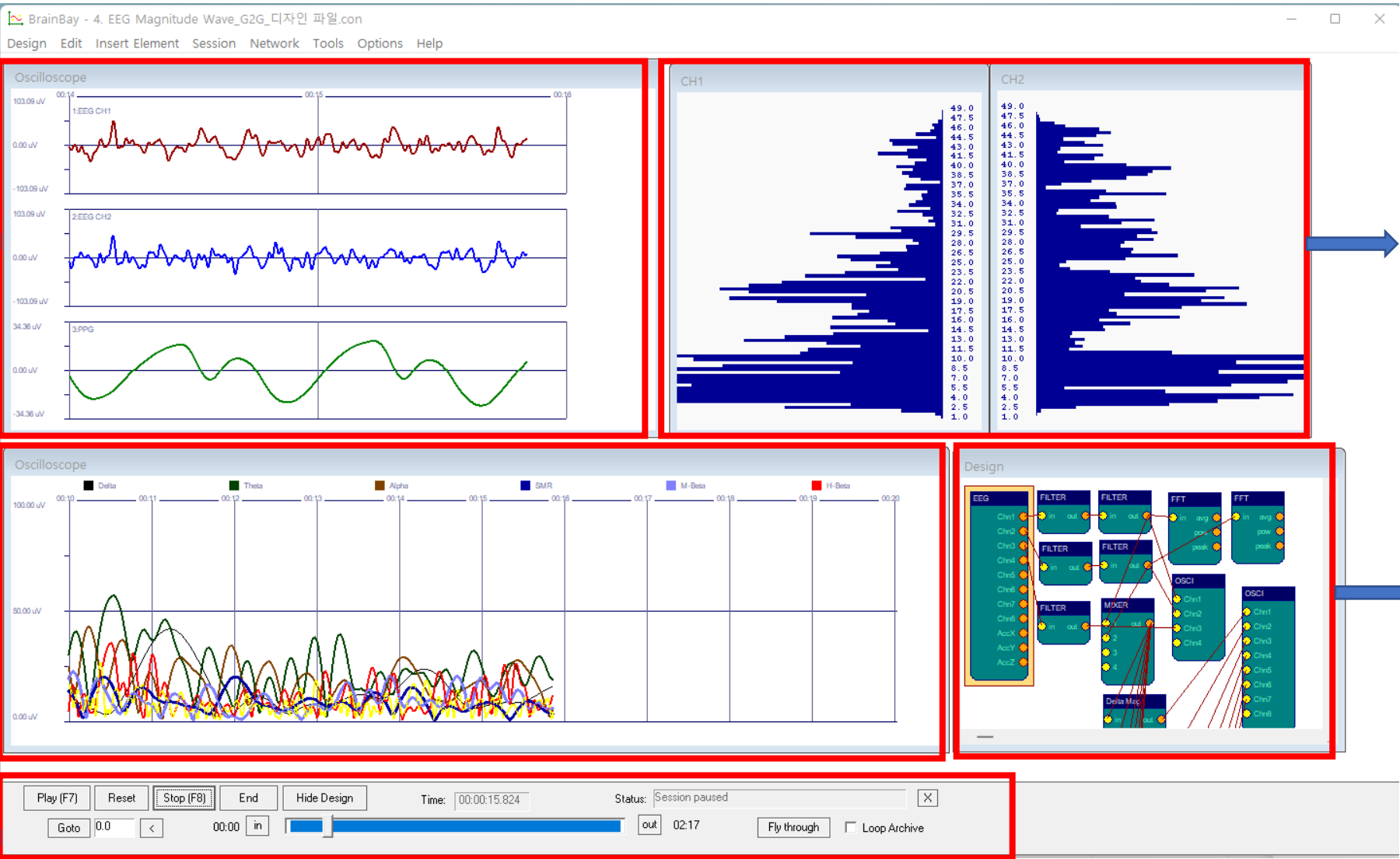

두 채널 EEG 및 PPG
실시간 데이터 파형

FFT 변환한 실시간
주파수대별 뇌파
데이터

뇌파별 실시간 파형

디자인 파일 설정
UI

기본 조작 tool